

分析天びん × イオナイザー
AP series × STABLO-AP
Set Campaign

静電気除去機/イオナイザー

STABLO-AP

静電気でお困りのお客様へ



9.2万円

イオナイザー

新型分析天びん

APシリーズ

計量作業のスピードアップ、
安定した計量を行いたいお客様へ



20.2万円~




イオナイザーの内蔵が可能！！
APシリーズ × STABLO-AP

帯電した試料を精度よく計量したいお客様へ



セット購入の場合
特別価格でご提供

分析天びんAPシリーズは、イオナイザSTABLO-APを内蔵できる機能を搭載しています。
ワンボタンでイオン照射をおこない、帯電した試料、容器を除電し再現性の高い計量がおこなえます。

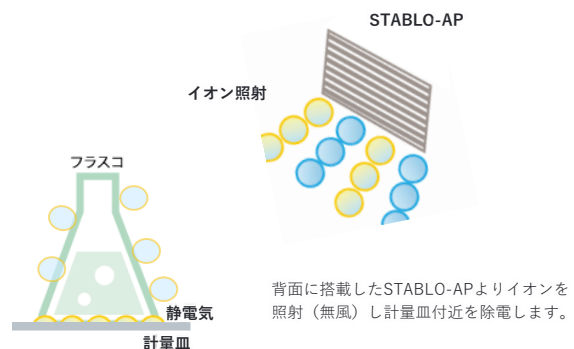

AP W-ADシリーズをご使用中のお客様
のユーザーインタビューを掲載中！！
是非ご覧ください



A bridge
with our customers 

STABLO-AP

こんなときに活躍します!

静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない!



アンプルの入り口や側面に付着して
抜いづらい。



STABLO-APでアンプルを除電。



数秒で除電完了。作業効率もアップ。

ゴム手袋にラップフィルムがくっつく!



ゴム手袋にラップフィルムが
まとわりついて作業しづらい。



STABLO-APをスタンドに取付け、
手袋を除電する。



およそ10秒ほどで除電され、
くっつくことがなくなった。

確実な除電能力

イオンバランスの良いAC方式を採用

- 逆帯電することがありません
- 広範囲を除電可能
- 長期間、安定した性能

無風で高速除電



P/N	品名	価格
S321-73700-01	STABLO-AP 本体(スタンド付き)	¥92,000

AP series

高速応答、高安定性を実現

分析天びんの新たなステージへ

High Speed

微量計量 (1mg~) の表示反応時間を約2秒に短縮。はかり通りの作業効率が大幅にUPします。

Stress Free

イオナイザSTABLO-APを装着可能。
静電気による影響を排除し、手間なく信頼性の高い計量を実現。



シリーズ名	Wシリーズ							Xシリーズ			
	AP225W	AP135W	AP125WD	AP225WD	AP124W	AP224W	AP324W	AP124X	AP224X	AP324X	
形名	AP225W	AP135W	AP125WD	AP225WD	AP124W	AP224W	AP324W	AP124X	AP224X	AP324X	
P/N	S321-74000-13	S321-74000-10	S321-74000-11	S321-74000-12	S321-74000-01	S321-74000-02	S321-74000-03	S321-74000-04	S321-74000-05	S321-74000-06	
価格	¥784,000	¥465,000	¥379,000	¥442,000	¥258,000	¥292,000	¥325,000	¥202,000	¥224,000	¥269,000	
ひょう量	220g	135g	120g/52g	220g/102g	120g	220g	320g	120g	220g	320g	
最小表示	0.01mg		0.1mg/0.01mg		0.1mg			0.1mg			
校正分銅	内蔵							内蔵			
繰り返し性 (ひょう量負荷時)	0.015mg (~20g) 0.03mg (~100g) 0.05mg (~ひょう量)	0.05mg	0.1mg/ 0.02mg	0.1mg/ 0.05mg	0.1mg		0.15mg	0.1mg		0.15mg	
繰り返し性 (低荷重時)	0.01mg (5g荷重)	0.015mg (5g荷重)		0.1mg (5g荷重)			0.1mg (10g荷重)	0.1mg (20g荷重)	0.1mg (5g荷重)	0.1mg (10g荷重)	0.1mg (20g荷重)
最小計量値 ※1	20mg		30mg		200mg			200mg			
直線性	±0.1mg		±0.2mg/ ±0.05mg	±0.2mg/ ±0.1mg	±0.2mg		±0.3mg	±0.2mg		±0.3mg	
応答時間 ※2	約8秒		約2秒/約8秒		約2秒			約2秒			
USBホスト(Type A)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
USBデバイス (Type B)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
レシピ調合	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
HPLC用緩衝溶液調整	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
mol換算機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
試料(濃度)調製	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
点検サポート機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タイマー-CAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
イオナイザ(オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

株式会社 島津製作所

URL : <https://www.an.shimadzu.co.jp/balance/>

販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先: カスタマーサポート担当

TEL: 03(5846)5707

E-mail: support@sd.c.shimadzu.co.jp

URL : <https://corp.sd.c.shimadzu.co.jp/>

ご注文・お問合せは...