


クリーンスタンプ® 発育例

Clean stamp


卵黄加マンニット食塩培地

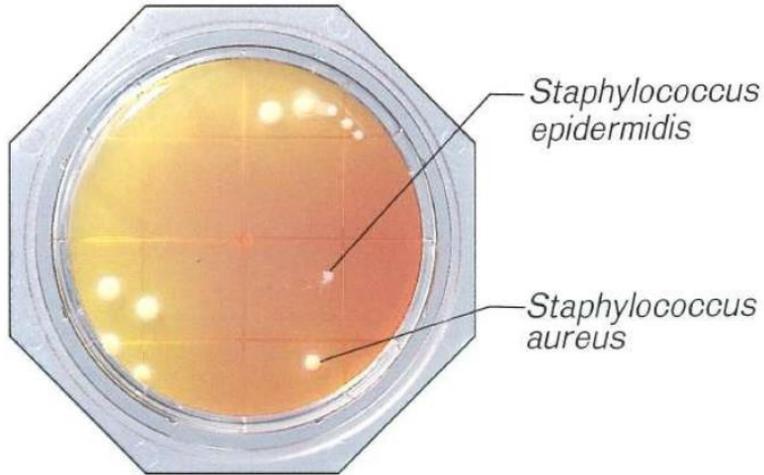

— *Staphylococcus aureus* 卵黄反応の見方 —

下記の2つの卵黄反応のどちらかが陽性であれば、*Staphylococcus aureus*と判定します。

レシチナーゼ反応

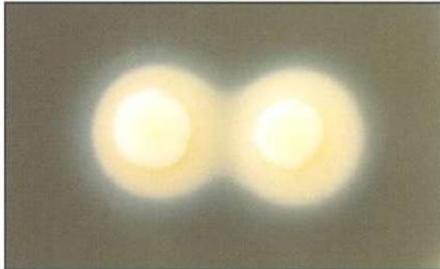

培地上面から観察すると、集落周辺の培地内部に白濁が認められる。

リパーゼ反応



上方斜めから観察すると、集落周辺の培地表面に真珠様光沢が認められる。

SCD寒天およびSCDLP寒天

