

# 分析天びん × STABLO-AP Set Campaign

静電気除去機/イオナイザー

**STABLO-AP**

静電気でお困りのお客様へ



9.2万円



新型分析天びん

**APシリーズ**

計量作業のスピードアップ、  
安定した計量を行いたいお客様へ



24.0万円~

イオナイザーの内蔵が可能！！

**APシリーズ×STABLO-AP**


帯電した試料を精度よく計量したいお客様へ



セット購入の場合  
特別価格でご提供

分析天びんAPシリーズは、イオナイザーSTABLO-APを  
内蔵できる機能を搭載しています。

ワンボタンでイオン照射をおこない、帯電した試料、  
容器を除電し再現性の高い計量がおこなえます。

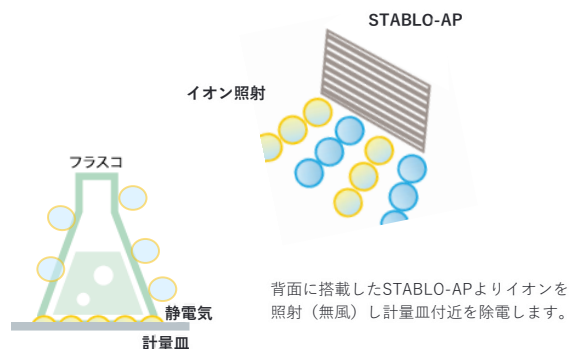

AP W-ADシリーズをご使用中のお客様  
のユーザーインタビューを掲載中！！  
是非ご覧ください



A bridge  
with our customers

## STABLO-AP

こんなときに活躍します！

静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない！



アンプルの入り口や側面に付着して  
扱いづらい。



STABLO-APでアンプルを除電。



数秒で除電完了。作業効率もアップ。

ゴム手袋にラップフィルムがくっつく！



ゴム手袋にラップフィルムが  
まとわりついて作業しづらい。



STABLO-APをスタンドに取付け、  
手袋を除電する。



およそ10秒ほどで除電され、  
くっつくことがなくなった。

## 確実な除電能力

イオンバランスの良いAC方式を採用

- 逆帯電することがありません
- 広範囲を除電可能
- 長期間、安定した性能

## 無風で高速除電



| P/N           | 品 名                  | 価 格     |
|---------------|----------------------|---------|
| S321-73700-01 | STABLO-AP 本体(スタンド付き) | ¥92,000 |

## AP series

高速応答、高安定性を実現

分析天びんの新たなステージへ

2025年7月1日からの改定価格表記です

## High Speed Stress Free

微量計量（1mg～）の表示反応時間を約2秒に短縮。はかり通りの作業効率が大幅にUPします。

イオナイザSTABLO-APを装着可能。  
静電気による影響を排除し、手間なく信頼性の高い計量を実現。



| シリーズ名              | Wシリーズ                                            |                  |                    |                   |                 |                  |                  | Xシリーズ           |                  |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 形名                 | AP225W                                           | AP135W           | AP125WD            | AP225WD           | AP124W          | AP224W           | AP324W           | AP124X          | AP224X           | AP324X           |
| P/N                | S321-74000-18                                    | S321-74000-15    | S321-74000-16      | S321-74000-17     | S321-74000-01   | S321-74000-02    | S321-74000-03    | S321-74000-04   | S321-74000-05    | S321-74000-06    |
| 価格                 | ¥931,000                                         | ¥553,000         | ¥450,000           | ¥525,000          | ¥307,000        | ¥347,000         | ¥387,000         | ¥240,000        | ¥266,000         | ¥320,000         |
| ひょう量               | 220g                                             | 135g             | 120g/52g           | 220g/102g         | 120g            | 220g             | 320g             | 120g            | 220g             | 320g             |
| 最小表示               | 0.01mg                                           |                  | 0.1mg/0.01mg       |                   | 0.1mg           |                  |                  | 0.1mg           |                  |                  |
| 校正分銅               | 内蔵                                               |                  |                    |                   | 内蔵              |                  |                  | 内蔵              |                  |                  |
| 繰り返し性<br>(ひょう量負荷時) | 0.015mg (～20g)<br>0.03mg(～100g)<br>0.05mg(～ひょう量) | 0.05mg           | 0.1mg/<br>0.02mg   | 0.1mg/<br>0.05mg  | 0.1mg           |                  | 0.15mg           | 0.1mg           |                  | 0.15mg           |
| 繰り返し性<br>(低荷重時)    | 0.01mg<br>(5g荷重)                                 | 0.01mg<br>(5g荷重) |                    |                   | 0.1mg<br>(5g荷重) | 0.1mg<br>(10g荷重) | 0.1mg<br>(20g荷重) | 0.1mg<br>(5g荷重) | 0.1mg<br>(10g荷重) | 0.1mg<br>(20g荷重) |
| 最小計量値 ※1           | 20mg                                             | 20mg             |                    |                   | 200mg           |                  |                  | 200mg           |                  |                  |
| 直線性                | ±0.1mg                                           |                  | ±0.2mg/<br>±0.05mg | ±0.2mg/<br>±0.1mg | ±0.2mg          |                  | ±0.3mg           | ±0.2mg          |                  | ±0.3mg           |
| 応答時間 ※2            | 約8秒                                              |                  | 約2秒/約8秒            |                   | 約2秒             |                  |                  | 約2秒             |                  |                  |
| USBホスト(Type A)     | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | －               | －                | －                |
| USBデバイス (Type B)   | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | ○               | ○                | ○                |
| レシピ調合              | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | －               | －                | －                |
| HPLC用緩衝液調整         | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | －               | －                | －                |
| mol換算機能            | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | ○               | ○                | ○                |
| 試料(濃度)調製           | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | －               | －                | －                |
| 点検サポート機能           | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | ○               | ○                | ○                |
| タイマー-CAL           | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | ○               | ○                | ○                |
| イオナイザ(オプション)       | ○                                                | ○                | ○                  | ○                 | ○               | ○                | ○                | ○               | ○                | ○                |

## 株式会社 島津製作所

URL : <https://www.an.shimadzu.co.jp/balance/>

販売元

## 島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL : 03 (5846) 5707

E-mail: [support@sdsc.shimadzu.co.jp](mailto:support@sdsc.shimadzu.co.jp)

URL : <https://corp.sdsc.shimadzu.co.jp/>

ご注文・お問合せは...